

Az új *standard*/ a mikrotűs RF kezelésben

forradalmasítja a hatóanyagok
bevételét és felszívódását

POTENZA™
by CYNOSURE®






A világon az első
4 módosított RF
a mikrotűs kezelést
új szintre emeli

BŐRFESZESÍTÉS*

PROBLÉMÁS BŐR JAVULÁSA

BŐR REVITALIZÁCIÓ



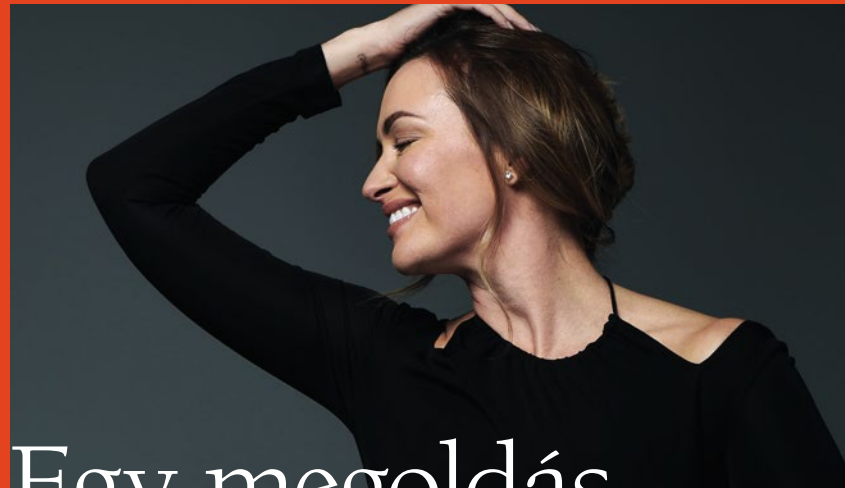

Egy megoldás minden páciensnek

A Potenza rendszer sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy személyre szabott kezeléseket alakítsunk ki a páciensek egyéni igényei szerint – minden bőrtípusra, az arcon vagy a testen, minden évszakban.

Szélesebb kezelési lehetőségek a páciensekhez igazodva *felületesen és mélyen*

A világon az első 4 módosított RF

Monopoláris, bipoláris, 1 & 2 MHz frekvenciával.
Felületes és mély kezelések egyetlen készülékkel.

Egyedülálló Tiger Tip™ technológia

Kezelés a bőr több rétegében egyidejűleg

Fusion Tip


A jobb lokális penetráció érdekében

Egytűs kézidarab


Célkeresztben a tisztátalanságok



Az első és egyetlen kezelőcsúcs mely fokozott hatóanyagbevitel révén *maximalizálja az eredményt*

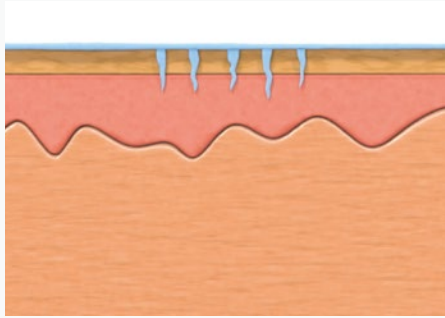

Normál RF tűk

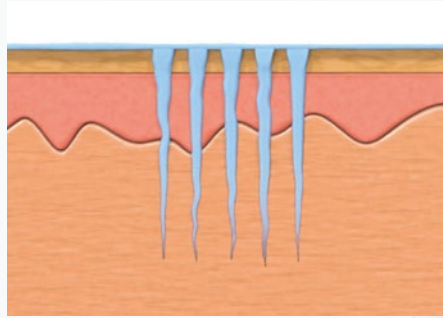

Fusion Tip


A helyi készítményeket magabiztosan juttatja az irha mélyebb rétegeibe





Fusion Tip

21 szigetelt tű
Választható mélység:
0.5 – 2.5mm

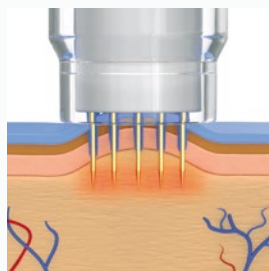


A duplakamrás kialakítás a bőr felszívása révén átmenetileg kiszélesíti a tűk által létrehozott nyílást, így a hatóanyag a csatornába jut, majd bentreked



Tiger Tip

16, 25 vagy 49
szakaszosan szigetelt tű
Választható mélység:
0.5 – 4.0mm

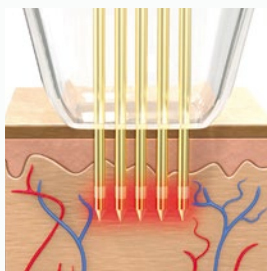


A bőrt több rétegben képes kezelni a hám túlzott károsítása nélkül



Insulated Tip

16, 25 vagy 49
szigetelt tű
Választható mélység:
0.5 – 4.0mm

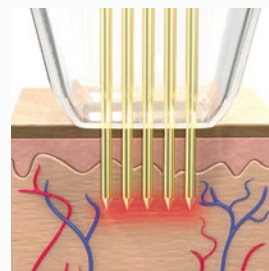


Ha a pontos mélység, illetve a kifejezetten mély behatolás a cél



Single Tip

0.8, 1.2 vagy 1.5mm
behatolási mélység

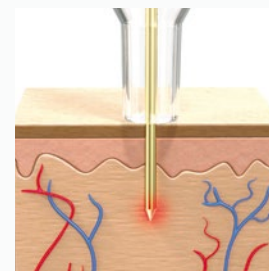

Pecízen megcélozza a kezelendő góccokat és a megfelelő helyre juttatja az energiát.

Látható eredmények. Jobb megtérülés.

ARC Murphy Plastic Surgery & Medical SPA jóvoltából




Kezelés előtt & 1 kezelés után

NYAK S. Doherty, MD jóvoltából.



Kezelés előtt & 1 kezelés után

HAS Elizabeth Huang, RN jóvoltából

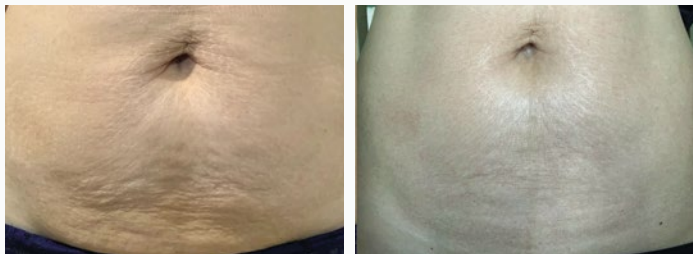

Kezelés előtt & 1 kezelés után

ARC J. H. Yoon, MD jóvoltából



Kezelés előtt & 3 kezelés után

További információért látogasson el:

www.drderm.net/cynosure-palomar-lezerek



*Lágy szövetek koagulációja révén.

©2021. Cynosure, LL. Minden jog fenntartva. A Cynosure a Cynosure LLC. részére regisztrált védjegy. A Tiger Tip a Cynosure LLC. részére regisztrált védjegy. A Potenza a Jeisys Medical Inc. részére regisztrált védjegy. A fotók felhasználása a jogtulajdonos írásbeli beleegyezése nélkül tilos.

A Potenza egy rádiófrekvenciás mikrotűs készülék, mely a lágy szövetek elektrokoagulációja és hemosztázisa céljára használatos különböző bőrgyógyászati állapotokban. A kezelést mellékhatások kísérhetik, mint az átmeneti vörösség, viszketés, égő érzés. Mint általában az orvosi kezeléseknél, nem minden páciens alkalmas a Potenza kezelésre. A képzett kezelő személy a hivatott a kezelésre való alkalmasság eldöntésére, valamint az azzal összefüggő veszélyek, a kezelés előkészítésével és utókezelésével kapcsolatos teendők, valamint minden kapcsolódó információ ismertetésére. Az elérhető eredmények egyéni- leg változnak, különbözőek és nem garantáltak.

Technikai adatok

RF típus	Bipoláris, monopoláris
Teljesítmény	50 Watt
Frekvencia	1 MHz, 2 MHz
Ismétlési ráta	0.5 – 3.0 sec (0.1 sec lépcsőkben)
Kezelőfejek	100-7043-001: Motoros kezelőfej 100-7043-002: AC kezelőfej
Kezelőcsúcsok	Motoros kezelőfejhez
Fusion Tip	100-7043-063: CP-21
Tiger Tip	100-7043-051: S-16 100-7043-052: S-25 100-7043-053: S-49
Insulated Tip	100-7043-054: I-16 100-7043-055: I-25 100-7043-056: I-49
	AC kezelőfejhez
Single Tip	100-7043-060: P1-08 100-7043-061: A1-12 100-7043-062: A1-15
Tű átmérője	250µm
Impulzushossz	5 – 500 ms (5 ms-os lépcsőkben)
Villamos hálózati	100-240V / 50-60Hz, 500 VA



Dr Derm Equipment Kft.

H-1024 Budapest, Fény u. 2. | mobil: +36 70 428 3865
laserinfo@drderm.net | www.drderm.net