


SCHWARZY

Izomerősítés edzés nélkül?

Erőfeszítés nélküli fokozatos izomnövesztés
neuromuszkuláris stimuláció révén

A SCHWARZY egyedülálló az esztétikai orvoslásban és az alakformálásban

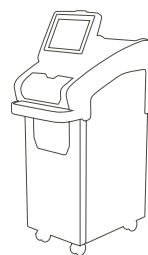

DEKA
Innate Ability



A SCHWARZY gyors győzelmei:

Izomzat definiálás és tónusfokozás
Izomtömeg növelés | Zsírszövet redukció

Kulcsinfó:

A Schwarzy a **TOP FMS mágneses technológia** révén lép az izomszövettel interakcióba, erőteljes izomösszehúzódnásokat indukálva. Különböző testfelszíneken alkalmazva, már néhány kezelés után **növeli az izomtónust és volument, javítja a testtartást.**

Miért válaszd a Schwarzy-t?

TOP FLAT MUSCLE STIMULATION = HATÁSOS ÉS KÉNYELMES

A **TOP FMS technológiának** köszönhetően az elektromos mező a kezelt területen egyenletesen halad át, megkülönböztethető energiacsúcsok nélkül. Ez a kiegyensúlyozott energiabevitel jobb toleranciát eredményez és növeli a kezelés hatékonyságát.

SZÉLESEBB VENDÉGKÖR


Minden vendég részére megfelelő, személyre szabott edzésprogramok: **AEROBIC, SHAPING & STRENGTH.** A program lefutása fokozatos izomtréninget eredményez, mindenki számára specifikus karakterisztikával.

ERGONÓMIKUS KEZELŐFEJEK (szabadom védi)

A kezelőfejek formája illeszkedik a test különböző területeihez. A **LAPOS**, az **ÍVELT** és az **OVÁLIS** kezelőfejek beépített folyadékhűtéssel vannak ellátva, mely nagy teljesítmény leadását teszi lehetővé, még hosszú időtartamú használat esetén is, növelve a kezelés hatékonyságát.




TUDOMÁNYOS HÁTTÉR

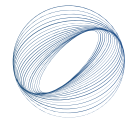

SCHWARZ Y

TOP FMS technológia: homogenitás és hatásosság

A DEKA Kutatás & Fejlesztés részlege az elektromágneses mező ideális formájának kialakításán dolgozott. Munkájuk gyümölcse **az energia homogén elosztása**, fájdalmat okozó vagy a páciens által nehezen tolerálható energiacsúcsok nélkül.

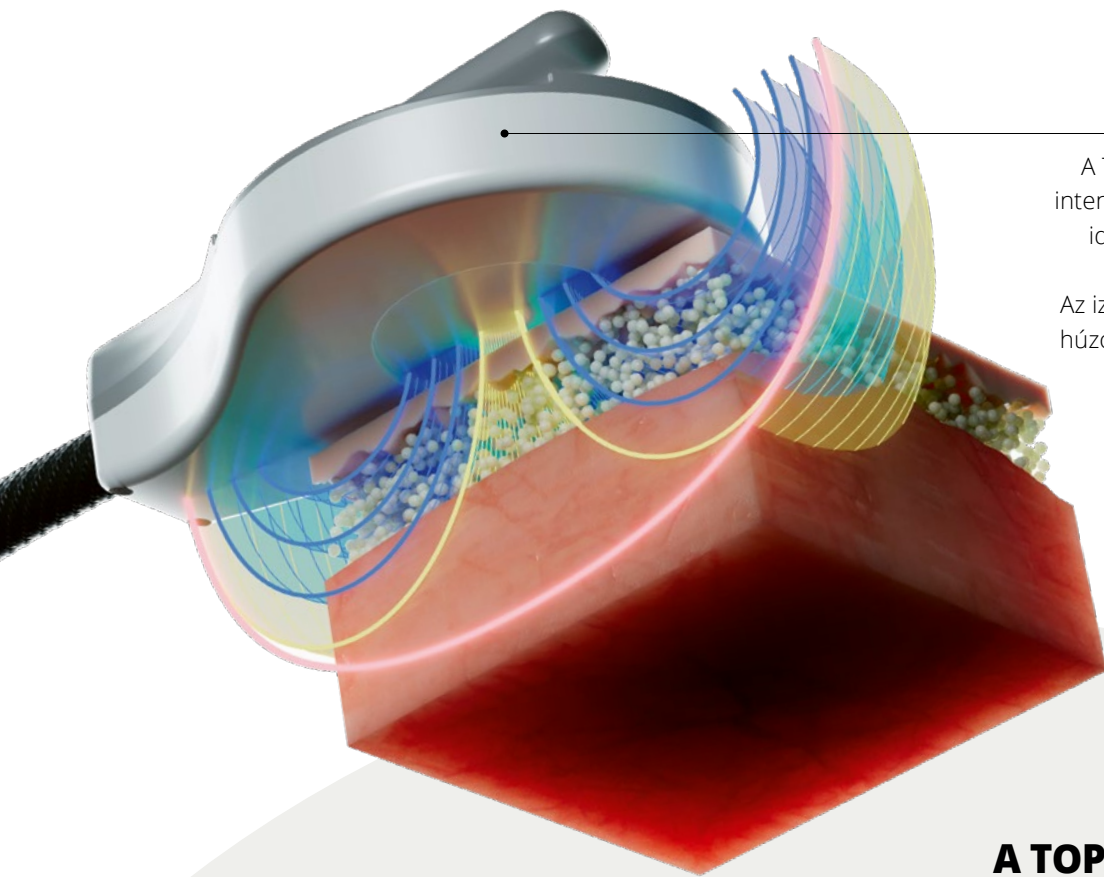

A TOP FMS technológia olyan intenzív izomösszehúzódnásokat idéz elő, melyek más módon nem lennének elérhetőek. Az izom több, mint 20.000-szer húzódik össze egyetlen kezelés alatt, mely erre a szerkezet újjáalakításával és az izomtömeg növelésével reagál.

A TOP FMS tökéletes, mély izomstimulációt hoz létre a mágneses ingerlés segítségével

Az elektromos stimuláció a perifériás idegrendszeren fejt ki a hatását, a bőrön elhelyezett elektródákon keresztül folyó kezelőáram révén, amely azonban nem eléggé intenzív az izmok megfelelő összehúzódnásához, emellett fájdalmas is lehet. Az elektródák alá gélt kell felvinni. A mágneses mezőnek nem kell leküzdenie a bőr viszonylag magas elektromos ellenállását, így a fájdalomérző idegvégződéseket sem aktiválja.

A mágneses stimuláció tehát az izomzatot úgy éri el, hogy nem jelentkezik az elektromos stimulációnál tapasztalható fájdalomérzet.

KÉNYELEMRE TERVEZETT KEZELŐFEJEK (szabadalom védi)

A kezelendő terület formájához illeszkedő kezelőfejek tökéletes energiabevitelt tesznek lehetővé.



3 KÜLÖNBÖZŐ FORMA



LAPOS

leginkább a combra
és a fenékre



ELLIPTIKUS


leginkább a has
kezeléséhez



ÍVELT

leginkább a lábszárra (vádli)
és a felkarra

TUDOMÁNYOS HÁTTÉR

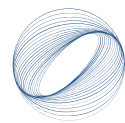

SCHWARZY

Személyre szabott és fokozatos tréning

A Schwarzy tréningprogramok – a fizikai kondíciótól függően – az izomzat edzésének újratekésztésére és a terhelés fokozatos növelésére egyaránt alkalmasak.

ülő foglalkozásúak csökkent izomtónussal
mérsékelten aktív emberek normál izomtónussal
sportos alkatúak izomerősítése és izomtömeg növelése

3 különböző protokoll a páciens edzettségi szintjéhez igazodva

Aerobic



Kezdő izomstimuláció edzetlen embereknek.

Shaping



Az izomzat trofizmusának és tónusának visszaállítására.
Edzőprogram azoknak, akik nem sportolnak rendszeresen.

Strength




Izomstimuláció izomerősítés és izomtömeg növelés céljából.
Edzett emberek számára.

Minden kezelési protokoll két modulból áll,
időrendi sorrendben, emelkedő intenzitással.


#1 – kezdő lépések, a sorozat első kezeléseiként végezzük

#2 – haladó lépések, a kezeléshez való alkalmazkodás során,
a folyamatos fejlődéshez


Klinikai eredmények

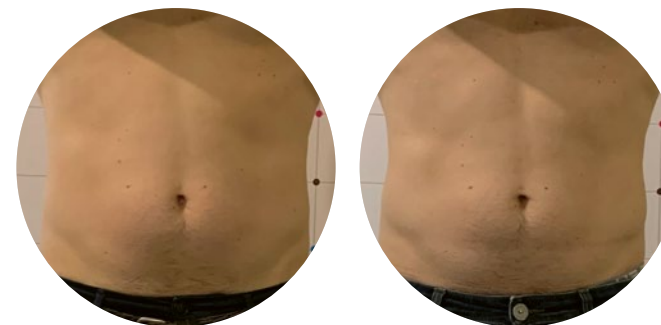


Schwarzy.
A. Leone, M.D. jóvoltából,
Pescara, Italy

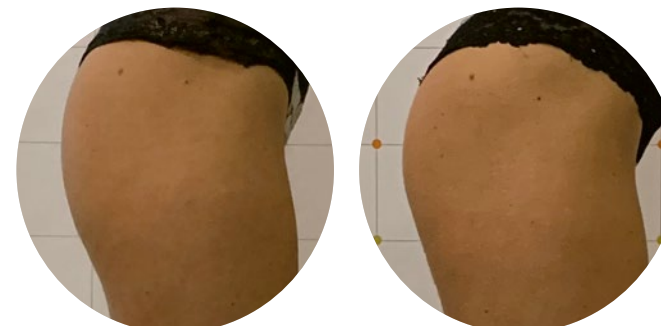

Schwarzy.
A. Leone, M.D. jóvoltából,
Pescara, Italy

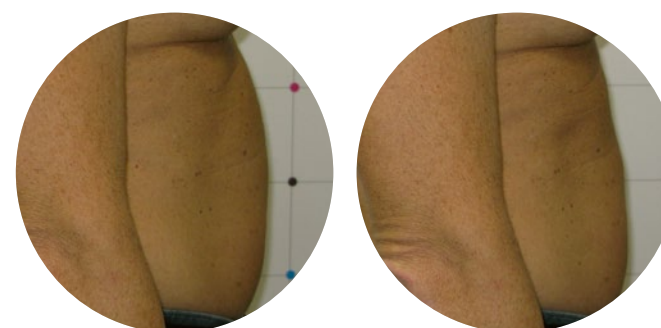

Schwarzy.
Prof. **P. Bonan**, M.D. jóvoltából,
Florence, Italy

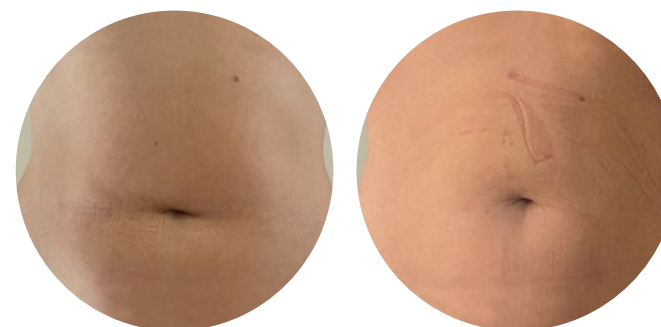

Schwarzy.
S. Bianchi, M.D. jóvoltából,
Parma, Italy

INNATE ABILITY

Ismerjük az ügyfeleinket és a piacunkat

A testkezelő szektor az elmúlt években gyorsan bővült és a trend folytatódik. A testkezelések piacán nagyfokú növekedést regisztráltak, különösen a fiatalabb generáció részéről. A **vevői érdeklődés a non-invazív alakformálás felé fordul**, a korábban sikeres energialapú eszközök irányából áttevődik erre a szegmensre.



\$1.0 Milliárd*

AZ ALAKFORMÁLÁS GLOBÁLIS PIACA 2019-BEN



+4,8%*

ELŐREJELZETT ÖSSZESÍTETT NÖVEKEDÉSI RÁTA 2024-IG



TÖBB MINT 3.9 Milliárd \$*

AZ ELŐREJELZÉSEK SZERINT 2026-IG

* Medical Insight – Energy Based Body Shaping (August 2020)

A felhasználók véleménye

“ A Schwarzy stimulálja az izomműködést, ezáltal növeli az izomtömeget és csökkenti a zsírszövet mennyiségét. Az elektromágneses mező előnyeit használja ki, mely eléri az izomszövet minden sejtjét a kezelt területen. A Schwarzyt a testkontúr mélyreható átformálására ajánlhatjuk, azoknak, akik mozgásszegény életmódjuk miatt nem fittek, és azoknak is, akik rendszeresen mozognak, de szeretnék az izomzatukat definiáltabbá tenni, illetve olyan izomcsoportot láttatni, amit az edzésekkel nem sikerül. Gyakorlatilag minden területet kezelhetünk a Schwarzyval: a comb elülső és belső oldalát, a hasat, a vádlit és a bicepszet.”

Dr. Giovanni Turra, M.D. – plasztikai sebész (Olaszország)

“ Az alapanyagcsere szintje direkt összefüggésben van a sovány testtömeggel (belső szervek, izomzat és csontok össztömege), amely testedzéssel fejleszthető. A Schwarzyval virtuális folyamatot generálunk: az izomtömeg növelésével az anyagcsere megélénkül, az izom reaktiválódik, fokozódik az izomtónus és erősödik az izomzat. A kezelés mindazoknak ajánlott, akik szeretnék helyreállítani az egyensúlyt, a megfelelő arányt a sovány testtömeg és a zsírszövet tömege között – ami az egészséges anyagcsere alapját képezi.”

Massimo Gualerzi, M.D. – kardiológus (Italy)
Longevity Medical Suite (Milánó, Olaszország)

TÖKÉLETES MEGOLDÁSOK

A SCHWARZY ERŐSSÉGEI

- Exkluzív **TOP FMS** mágneses mező
- **Non-invazív** rendszer
- **Nincs dermoepidermális** érintettség
- **Fájdalommentes**
- **Fokozatos edzés** személyre szabott program szerint
- **Nincs** eldobandó alkatrész, vagy pluszköltség kezelésenként
- **Tökéletes szinergia** és együttműködés az **ONDA-val**

 **Only for DEKA felhasználóknak:**
nagy segítség a mindennapi praxisban
DEKA Club



Műszaki adatok

SCHWARZY	
Energiaforrás	Elektromágneses mező
Intenzitás	2,5 Tesla
Ismétlési frekvencia	1-150 Hz
Pulzusidő	250 μ s $\pm$ 20%
Méret, tömeg	73 (magasság) x 41 (szélesség) x 126 (mélység) cm, 60 kg

A Schwarzy a nemzetközi előírásoknak megfelelő maximális elektromágneses teljesítményhez lett méretezve. A létrehozott mágneses mező egyenletesen szétterjedő ingerlést eredményez, mely stimulálja az izomzatot. A következményes áramhatás (mA/cm²-ben mérve) a törvényben előírt értékeknek felel meg.



Kövessen minket!



www.drderm.net



Dr Derm Equipment Kft.
1026 Budapest, Fillér u. 33.
Mobil: 06-70 428-3865
Telefon: 06-1 316-6500
E-mail: laserinfo@drderm.net



DEKA Innate Ability

A DEKA – az El.En. Groupnak a részeként – a lézer és fényforrások orvosi alkalmazásának területén világszinten élen járó tervező és gyártó vállalat. A DEKA termékeit több mint 120 országban értékesíti kiterjedt forgalmazói hálózattal és közvetlen irodán keresztül Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Japánban és az Egyesült Államokban. A DEKA kiválósága elismertségének és tapasztalatának fémjele, amit több mint 30 éves K+F tevékenysége igazol. A minőség, innováció és technológiai kiválóság alapján a DEKA és termékei egyedülálló és megkülönböztetett pozíciónak örvendenek világszerte. A DEKA lézertermékeit a 93/42/EGK irányelv rendelkezéseivel és minőségbiztosítási rendszerével összhangban gyártja, a termékek az ISO 9001 és ISO 13485 szabványoknak felelnek meg.

DEKA M.E.L.A. s.r.l. – Minden jog fenntartva – A termékek fejlesztése érdekében a cég fenntartja magának a jogot, hogy a leírásokat előzetes bejelentés nélkül módosítsa. A dokumentumokat kizárólag egészségügyi szakemberek használhatják. A brossúra nem az USA piacra készült.